

# LA NOUVELLE TECHNOLOGIE PEPTIDIQUE

Visage | Corps | Cheveux



CAREGEN CO., LTD.



## Seringues préremplies

avec une harmonie de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés  
dans des complexes injectables à libération prolongée.

**Cap**actuel  
MEDICAL

*Esthétique préventive et réparatrice*

## PROSTROLANE inner B

Gel transparent à libération prolongée à injecter dans la couche sous-cutanée. Complexe à base de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés dont l'action lipolytique, anti-lipogenèse permet une réduction des graisses localisées.

- > Zone d'injection : abdomen, double menton, joue, bras, poignée d'amour, extérieur et intérieur de cuisses, genoux.
- > Volume d'injection : Abdomen = 12 ml par séance (max. 20ml).  
Double menton = 4 ml par séance (max.10ml).
- > Volume par point : 0.2 cc par point.
- > Profondeur d'injection : Couche sous-cutanée.
- > Protocole : 4 séances à 2 semaines d'intervalle.
  - Obésité abdominale : 2 cm entre les pt / 6 ml par côté.
  - Obésité lourde : espace + grand (5 cm) pour + d'injections.
  - Double menton : il est recommandé d'injecter tous les 1 cm.



**Composition :** Acide hyaluronique (0,7%),  
PBS (solution saline tamponnée au phosphate),  
Complexe peptidique (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43,  
tripeptide-41, Octapeptide-11).



Seringue préremplie de 2 ml



## PROSTROLANE inner B SE

Gel transparent à libération prolongée à injecter dans la couche sous-cutanée. Complexe à base de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés dont l'action lipolytique, anti-lipogénèse permet une réduction des poches sous les yeux.


- > Zone d'injection : poches générées par les cellules graisseuses.
- > Volume d'injection : 0.2~0.3 ml maximum par œil.
- > Volume par point : 0.03 ~ 0.05 cc par point.
- > Profondeur d'injection : suivre os périorbitaire.
- > Protocole : 2 à 3 séances à 2 semaines d'intervalle.



**Composition :** Acide hyaluronique (0,7%), PBS (solution saline tamponnée au phosphate), Complexe peptidique (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11).



Seringue préremplie de 1 ml

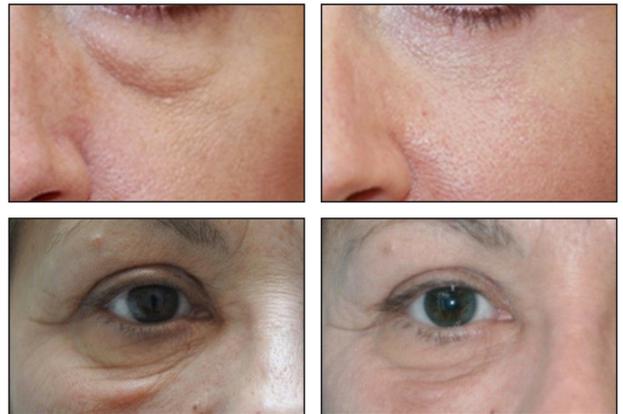

## PROSTROLANE blanc B

Gel transparent à libération prolongée à injecter dans la couche intradermique. Complexe de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés dont l'action permet de blanchir, éclaircir, tonifier la peau.

- > Zone d'injection : zones pigmentées intégrales ou locales.
- > Volume d'injection : 2 ml par séance (max.4ml).
- > Volume par point : 0,05 - 0,2 cc.
- > Profondeur d'injection : couche intradermique.
- > Protocole : 2-3 séances à 2 semaines d'intervalle.



**Composition :** Acide hyaluronique (0,7%), PBS (solution saline tamponnée au phosphate), Complexe peptidique (Oligopeptide-92, Octapeptide-11, Feruloyl Oligo peptide-33, Valprooyl Oligopeptide-33).



Seringue préremplie de 2 ml



## PROSTROLANE natural B

Gel transparent à libération prolongée à injecter dans la couche intradermique. Complexe à base de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés dont l'action permet une correction naturelle des rides et rajeunissement cutané.

- > Zone d'injection : rides fines du front, zones temporales, cou, plis nasolabiaux, lignes de marionnettes, décolleté.
- > Volume d'injection : 2 à 4 ml par séance (max. 5ml).
  - Glogau type I & II : 2 ml par séance.
  - Glogau type II & IV : 4 ml par séance.
- > Volume par point : 0,05 - 0,2 cc.
- > Profondeur d'injection : couche intradermique.
- > Protocole : 3 séances à 2 semaines d'intervalle.



**Composition :** Acide hyaluronique (0,7%), PBS (solution saline tamponnée au phosphate), Complexe peptidique (Oligopeptide-24, Decapeptide-36, Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-92).



Seringue préremplie de 2 ml




CAREGEN CO., LTD.

# DR.CYJ

## HAIR FILLER

Cheveux denses, sains, éclatants

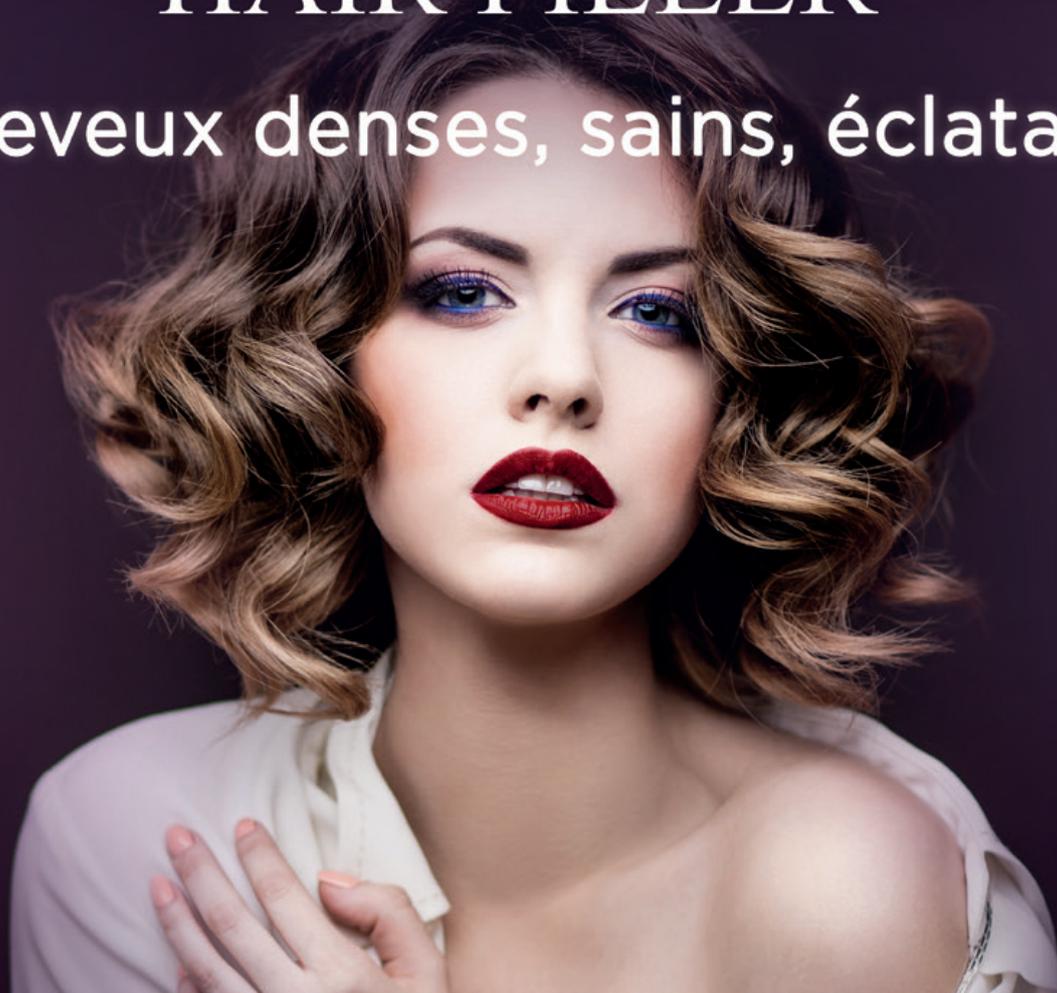

L'incontournable complexe peptidique pour des traitements performants


**4 fois primé au Pearl of Aesthetic Dermatology par plus de 20 000 Médecins.**

Ce traitement fonctionne sur les hommes et les femmes de tout âge souffrant d'alopecie, quel que soit le stade où ils se trouvent : en cas de premiers symptômes ou en phase avancée.

Son champ d'action ne se limite pas à cela, mais il s'applique aussi lorsque les cheveux sont fins et affaiblis ou qu'il y a une chute excessive de cheveux. Même si l'on cherche simplement à améliorer l'épaisseur des cheveux et ainsi augmenter l'apparence générale du volume dans les cheveux.

En cas de greffe capillaire, il aide également à augmenter le taux de survie des cheveux greffés.

CE  
2265

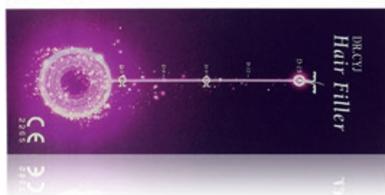

**Capactuel**  
MEDICAL


*Esthétique préventive et réparatrice*

**DR.CYJ**  
**HAIR FILLER**  
Hair cell and scalp revitalization

**DR CYJ HAIR FILLER - Le 1er Filler capillaire au monde.**  
**Complexe peptidique innovant**  
**pour la repousse des cheveux, la reconstruction du cuir chevelu.**



**DR.CYJ Hair Filler**

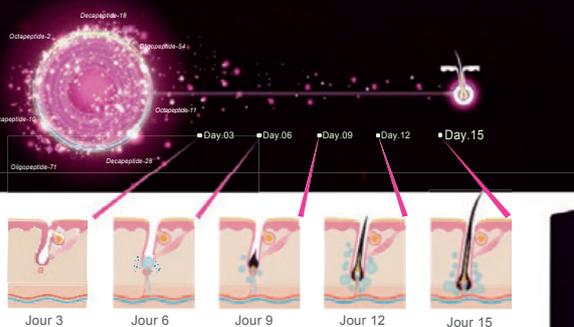

**Capactuel**  
MEDICAL

*Preventive and Restorative Aesthetic*



**DR.CYJ Hair Filler Cocktail**

20-22, rue Richer - 75009 Paris - France - [info@capactuel.com](mailto:info@capactuel.com)

[www.capactuel.com](http://www.capactuel.com)

## Application

- ✓ Patients avec alopecie non-cicatricielle .
- ✓ Homme et femme qui ont des cheveux clairsemés.
- ✓ Receveurs de greffe de cheveux qui veulent augmenter le taux de survie.
- ✓ Patients victimes d'alopecie qui veulent créer une synergie avec d'autres traitements ( contre perte de cheveux ou pour repousse) .

## Avantages

1. Complexe peptidique breveté et exclusif pour la repousse et la santé des cheveux.
2. Technologie à libération prolongée qui maximise l'efficacité des 7 peptides de croissance capillaire.
3. Applicable et efficace sur tout type d'alopecie non cicatricielle.
4. Cliniquement prouvé.

## Composition :

Acide hyaluronique (0,7%),PBS (solution saline tamponnée au phosphate),

### Complexe peptidique ( 7 peptides brevetés ) :

Décapeptides 10, Oligopeptide-54 ( Anti-chute ),

Octapeptide-11 ( Anti-inflammatoire )

Décapeptide-28, Octapeptide-2, Oligopeptide-71, Décapeptide-18 ( Croissance des cheveux )





## Optimiser chaque procédure d'injection.

HYCOOX est un dispositif de distribution de solutions automatisé qui permet un gain de temps non négligeable ainsi qu'une meilleure maîtrise de la quantité produit injectée. De plus, la forme des aiguilles améliore l'expérience patient car l'injection est moins douloureuse. HYCOOX maximise la facilité d'utilisation en rendant la profondeur d'injection plus précise. HYCOOX est le dispositif automatisé le plus avancé et modulable pour réussir ses procédures d'injections thérapeutiques et esthétiques en toute sécurité.

### Champs d'application multiples et variés.

## Visage | Corps | Cheveux

### Pièce à main modulaire.

Le dispositif HYCOOX dispose d'un porte seringue avec un système de piston qui permet d'accueillir différents types de seringues à têtes spécifiques.

### Caractéristiques techniques.

- 3 modes d'injection : Auto, Tir Manuel, Semi Auto.
- 6 types de seringues de 1CC à 10CC (verre et autres).
- 8 types de procédures d'injection prédéfinis + 1 programme libre et personnalisable.
- 6 niveaux de vitesse qui s'adaptent aux 6 niveaux de viscosité produit.
- 4 niveaux de pression d'aspiration en fonction du type de peau.
- Intervalle entre chaque injection de produit paramétrable.



► Seringue modulaire à tête interchangeable.



► Pièce à main à seringues interchangeables.



Tête à 9 aiguilles - 32G - 0,8 mm  
Utilisation conseillée : Visage.  
Tête à 9 aiguilles - 32G - 1,2 mm  
Utilisation conseillée : Visage.



Tête à 5 aiguilles - 32G - 2 mm  
Utilisation conseillée : Cheveux.  
Tête à 5 aiguilles - 32G - 3 mm  
Utilisation conseillée : Double menton.  
Tête à 5 aiguilles - 32G - 4,5 mm  
Utilisation conseillée : Corps.