

Gentlo™

silkro

1^{re} Combinaison de traitement cutané associant
Radiofréquence + Technologie Plasma

Modulable




5 Pièces à mains Gentlo disponibles



Gentlo s'inscrit dans la durée et dépasse le simple effet de mode !

Gentlo traite rapidement et efficacement
un grand nombre de pathologies grâce à ses multi-technologies.

Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*

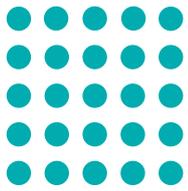

Gentlo™

Une Combinaison Innovante alliant RF et PLASMA

GENTLO est le premier dispositif associant RF et technologie PLASMA. Effet liftant, resserrement cutané et revitalisation globale de peau, de l'épiderme au derme un résultat optimal grâce à une synergie de traitements.



RM | RF-Microneedle

Microaiguilles pour RF Fractionnée



RN | RF-Needle

Aiguille émettrice à RF Monopolaire



PS | PLASMA

Tête pour traitement au Plasma



RC | RF-Circle

Tête émettrice plate à RF Monopolaire



RV | RF-Vaginal

Sonde vaginale à RF Monopolaire




RC | RF-Circle

Tête émettrice plate à RF Monopolaire

Chauffage des fibres avant et après le traitement

Avec la petite céramique RF, la transmission sur la peau de l'énergie RF est possible là où il est difficile d'utiliser une aiguille.

A utiliser avant et après un traitement d'acné, rajeunissement global de peau. Peut être appliqué dans le cadre d'un traitement vulvaire.

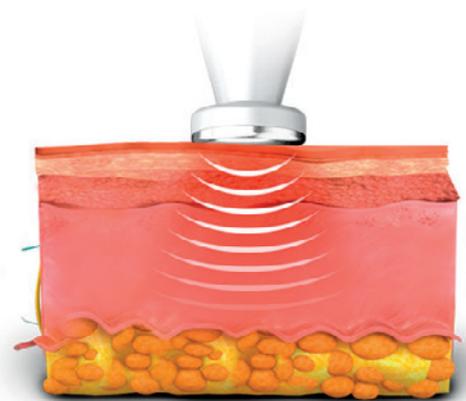

RV | RF-Vaginal


Sonde vaginale à RF Monopolaire

Traitement vaginal spécial

Traitement pratique par radiofréquence destiné femmes.

Non invasif, non chirurgical, sans anesthésie.

Rajeunissement et resserrement vaginal, colpoxérose, il est possible d'obtenir un traitement optimal grâce à une pièce à main incurvée ergonomique.


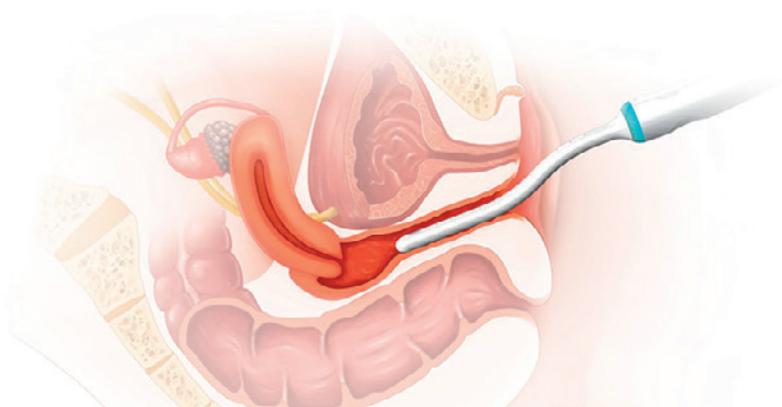




PS I PLASMA

Tête pour traitement au Plasma. Blanchiment, stérilisation, resserment, détente, absorption des ingrédients cosmétiques accrue de 466%. Résultats de traitement consolidés par des résultats d'essais cliniques.

Technologie

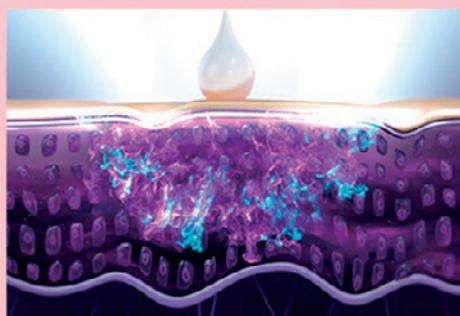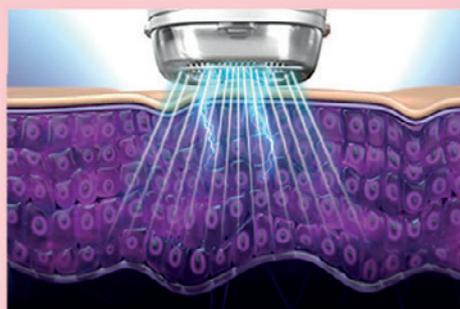

Production de plasma stable à puissance élevée.

Emission d'ions plasmatiques grâce à une tête spécifique.

Le plasma affecte le potentiel membranaire pour une absorption profonde de molécules de solution. Le plasma stérilise et stimule la régénération des cellules cutanées.



Skin Booster PLASONIC

L'ampoule contient des acides aminés, des vitamines et 4 tripeptides différents qui incluent une forte concentration de facteurs de croissance. Il s'agit d'un double booster cutané qui améliore l'effet des traitements PLASONIC dans le rajeunissement et le blanchiment de la peau.



- Effet hydratant : 100%**
- Resserment des pores : 82%**
- Effet adoucissant : 91%**
- Réduction des rides : 91%**



Alarme indiquant la fin des tirs



Assistance vocale

안녕하세요!
hello!
您好!
¡Hola!
أهلاً

5 langues disponibles

AUTO

Mode de sélection



Fonction mémoire




RN | RF-Needle


Aiguille émettrice à RF Monopolaire

Destruction sélective des glandes sébacées

L'aiguille RF détruit sélectivement les glandes sébacées
N'endommage pas l'épiderme, traite l'acné, prévient les récives.

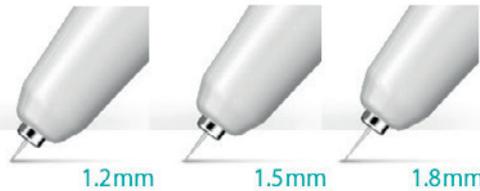

1.2mm, 1.5mm, 1.8mm (Tout type isolé) Effet thermique de 0.9mm, 1.2mm, 1.5mm


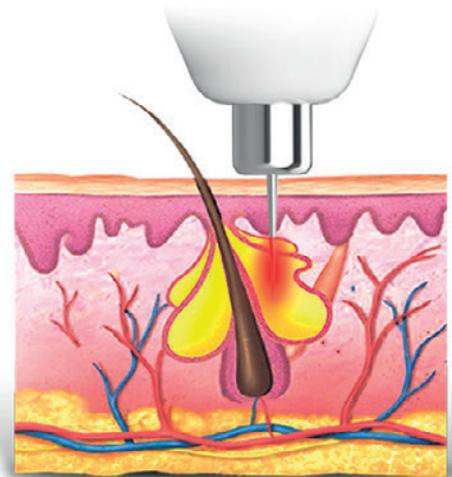


RM | RF-Microneedle

Microaiguilles pour RF Fractionnée. Aiguille isolés et non isolés pour des traitements à 2000 tirs.
Resurfacement, cicatrice d'acné, hypertrophie, vergeture, resserment.


GENTLO RF Micro-aiguilles spéciales

Profondeur de l'aiguille réglable de 0,5 mm à 3,5 mm et offrant un effet d'aiguille non isolée ou isolée

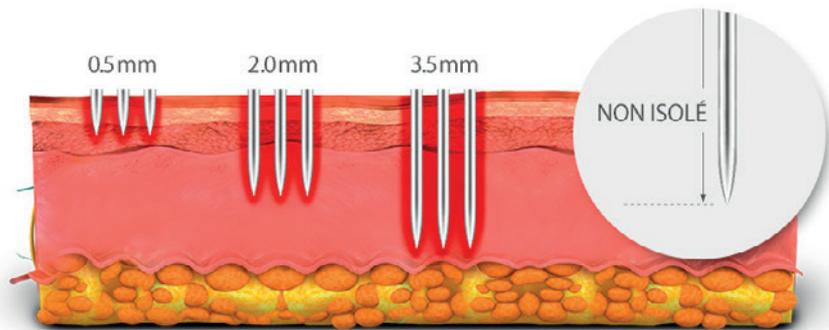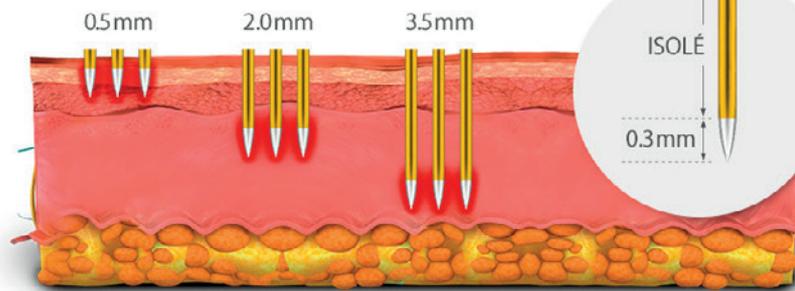

Angle de vue large


Taille de surface d'embout réduite de 25 %
qui minimise les chevauchements lors de
l'application, offre un angle de vision large
pour une procédure plus ciblée et précise.

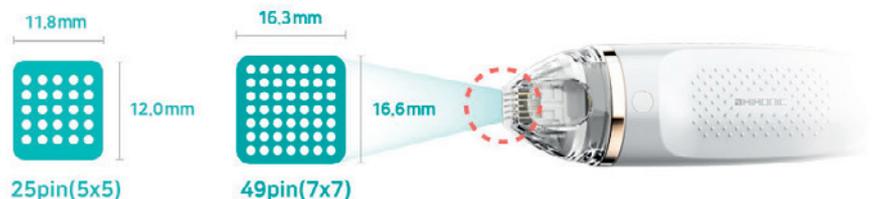

Traitement des lésions

Traitement par RF

Traite cicatrices, vergetures, hyperhidrose, pores, rides fines, Permet un rajeunissement cutané global, lifting, revitalisation, resurfaçage, resserrement de peau.

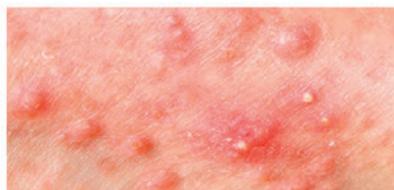

Traitement par PLASMA

Améliore la texture et densité cutanés et qualité des pores, Réduit rides et sécheresse cutanée, Effet tonifiant et hydratant, blanchissant. Administration de principes actifs.




RF pour la femme

Resserrement vaginal, blanchissement vulvaire, rajeunissement vaginal



1 Smart Integrated System (SIS)

Système intégré intelligent. Auto-surveillance et diagnostic en ligne permettant le dépannage en temps réel.

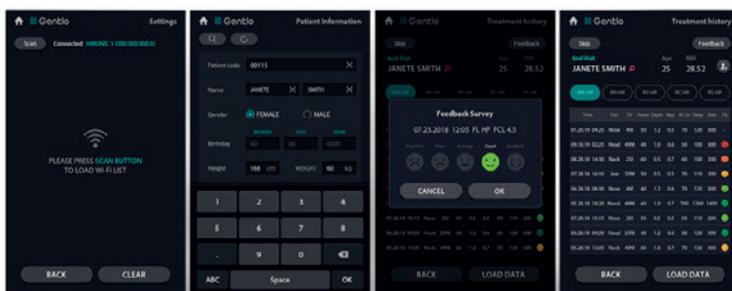

Gestion à distance par Cloud System

- Avis de remplacement de consommables
- Protocoles enregistrés
- Auto-diagnostic et inspection
- Prévention des dysfonctionnements et fonctions d'assistance
- Vérification des prises de vue et de l'utilisation de l'appareil
- Mise à jour à distance du logiciel/micrologiciel disponible




2 Big Data System

Accumulation de données de traitements qui permet aux utilisateurs de GENTLO d'améliorer et sécuriser les protocoles.

3 Graphical User Interface Simple & Intuitive

Interface utilisateur colorée GENTLO

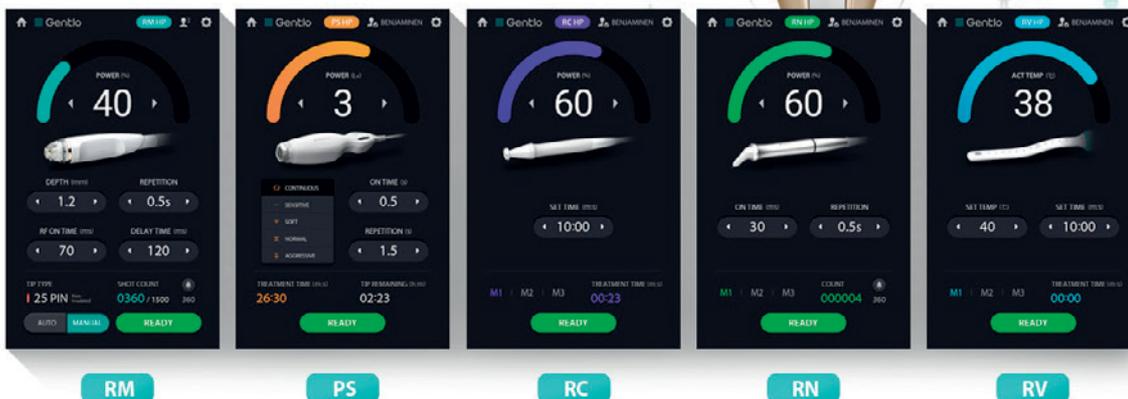

Ecran LCD 12.1"

Inclinaison maximale
d'écran de 75°



Technologie de Capteurs

Système de reconnaissance
automatique de pièce à main.



Système de Ventilation

Orifice pour une circulation
d'air rapide et puissant.



Pièce à main	Radio Frequence	RF-Micro Needle	25pin	Isolé	
				Non isolé	
		RF-Circle	30V~360V		
			RF-Needle 1pin	10V~168V	
			RF-Vaginal	10V~168V	
		PLASMA	Niveau 1~5		
Nombre de tirs		2000 tirs			
Profondeur de pénétration		0.5~3.5mm (0.1 step)			
Répétition		Single / 0.2 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 2.0 (sec)			
RF - Intensité		Niveau 1~10			
Surface de traitement		25PIN (8x8mm) / 49PIN (2x2mm)			
Fréquence		2MHz			
RF - Temps d'émission		50~950ms			
Agrément / Commodité		Grand écran LCD 12.1"			
		5 Langues disponibles (EN, CN, KR, ES, AR)			
		Assistance vocale			
		Mode de sélection auto			
		Fonction mémoire			
		Orifice de circulation d'air			
Général	Sortie max	25W (25pin) / 50W (49pin)			
	Dimensions	654 (l) x 768 (L) x 1287 (H)			
	Poids	43kg			

Capactuel
L'esthétique
Préventive & Réparatrice

Pour plus
d'information

