


LA NOUVELLE TECHNOLOGIE PEPTIDIQUE

Visage | Corps | Cheveux



CAREGEN CO., LTD.

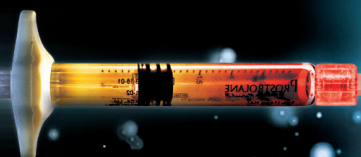

Seringues préremplies

avec une harmonie de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés
dans des complexes injectables à libération prolongée.

Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice

PROSTROLANE inner B

Gel transparent à libération prolongée à injecter dans la couche sous-cutanée. Complexe à base de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés dont l'action lipolytique, anti-lipogenèse permet une réduction des graisses localisées.

- > Zone d'injection : abdomen, double menton, joue, bras, poignée d'amour, extérieur et intérieur de cuisses, genoux.
- > Volume d'injection : Abdomen = 12 ml par séance (max. 20ml).
Double menton = 4 ml par séance (max. 10ml).
- > Volume par point : 0.2 cc par point.
- > Profondeur d'injection : Couche sous-cutanée.
- > Protocole : 4 séances à 2 semaines d'intervalle.
 - Obésité abdominale : 2 cm entre les pt / 6 ml par côté.
 - Obésité lourde : espace + grand (5 cm) pour + d'injections.
 - Double menton : il est recommandé d'injecter tous les 1 cm.



Composition : Acide hyaluronique (0,7%),
PBS (solution saline tamponnée au phosphate),
Complexe peptidique (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43,
tripeptide-41, Octapeptide-11).



Seringue préremplie de **2 ml**



PROSTROLANE inner B SE

Gel transparent à libération prolongée à injecter dans la couche sous-cutanée. Complexe à base de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés dont l'action lipolytique, anti-lipogénèse permet une réduction des poches sous les yeux.


- > Zone d'injection : poches générées par les cellules graisseuses.
- > Volume d'injection : 0.2~0.3 ml maximum par œil.
- > Volume par point : 0.03 ~ 0.05 cc par point.
- > Profondeur d'injection : suivre os périorbitaire.
- > Protocole : 2 à 3 séances à 2 semaines d'intervalle.



Composition : Acide hyaluronique (0,7%), PBS (solution saline tamponnée au phosphate), Complexe peptidique (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11).



Seringue préremplie de 1 ml

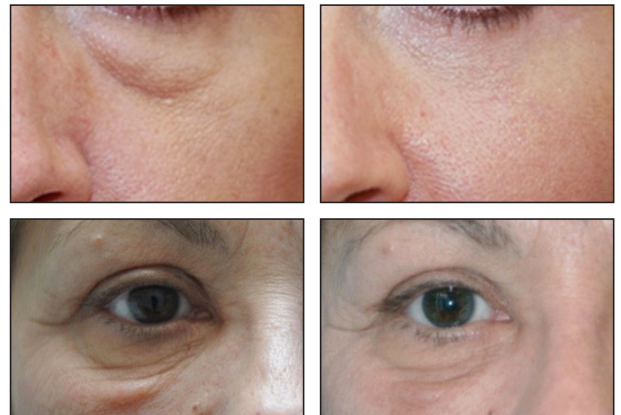

PROSTROLANE blanc B

Gel transparent à libération prolongée à injecter dans la couche intradermique. Complexe de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés dont l'action permet de blanchir, éclaircir, tonifier la peau.

- > Zone d'injection : zones pigmentées intégrales ou locales.
- > Volume d'injection : 2 ml par séance (max.4ml).
- > Volume par point : 0,05 - 0,2 cc.
- > Profondeur d'injection : couche intradermique.
- > Protocole : 2-3 séances à 2 semaines d'intervalle.



Composition : Acide hyaluronique (0,7%), PBS (solution saline tamponnée au phosphate), Complexe peptidique (Oligopeptide-92, Octapeptide-11, Feruloyl Oligo peptide-33, Valprooyl Oligopeptide-33).



Seringue préremplie de 2 ml



PROSTROLANE natural B

Gel transparent à libération prolongée à injecter dans la couche intradermique. Complexe à base de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés dont l'action permet une correction naturelle des rides et rajeunissement cutané.

- > Zone d'injection : rides fines du front, zones temporales, cou, plis nasolabiaux, lignes de marionnettes, décolleté.
- > Volume d'injection : 2 à 4 ml par séance (max. 5ml).
 - Glogau type I & II : 2 ml par séance.
 - Glogau type II & IV : 4 ml par séance.
- > Volume par point : 0,05 - 0,2 cc.
- > Profondeur d'injection : couche intradermique.
- > Protocole : 3 séances à 2 semaines d'intervalle.



Composition : Acide hyaluronique (0,7%), PBS (solution saline tamponnée au phosphate), Complexe peptidique (Oligopeptide-24, Decapeptide-36, Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-92).



Seringue préremplie de 2 ml



CAREGEN CO., LTD.



DR. CYJ Hair Filler

Solution transparente à libération prolongée à injecter dans le derme. Complexe sans équivalent à base de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés qui peut traiter efficacement toutes alopécies non cicatricielles. Permet de reconstruire le cuir chevelu, réguler les mécanismes impliqués dans la perte et repousse du cheveu.




- > Zone d'injection : cuir chevelu.
- > Volume par point : 0.02~0.05 cc.
- > Protocole : 1 injection tous les 0.2~0.3 cm. 1 cm par ligne.
 - Traitement standard : 1 séance toutes les 2 semaines pendant 8 semaines (Total : 4 séances).
 - Traitement intensif : 1 séance toutes les 2 semaines pendant 8 semaines (Total : 4 séances) + 1 séance par mois pendant 3 mois (jusqu'à 6 mois).



Composition : Acide hyaluronique (0,7%), PBS (solution saline tamponnée au phosphate), Complexe peptidique (Décapeptide-28, Octapeptide-2, Oligopeptide-71, Décapeptide-18, Oligopeptide-54, Octapeptide-11, Décapeptide-10)

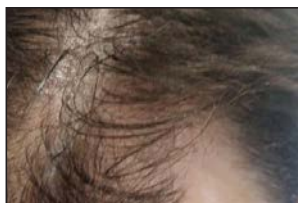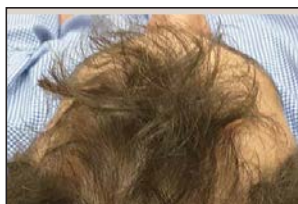

Seringue préremplie de 1 ml

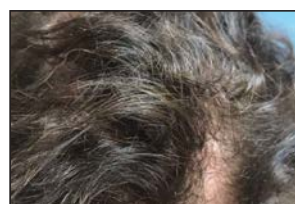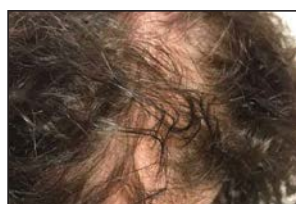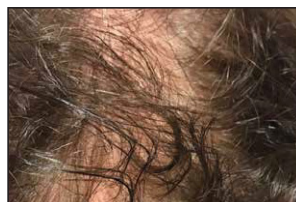

CAREGEN CO., LTD.



Optimiser chaque procédure d'injection.

HYCOOX est un dispositif de distribution de solutions automatisé qui permet un gain de temps non négligeable ainsi qu'une meilleure maîtrise de la quantité produit injectée. De plus, la forme des aiguilles améliore l'expérience patient car l'injection est moins douloureuse. HYCOOX maximise la facilité d'utilisation en rendant la profondeur d'injection plus précise. HYCOOX est le dispositif automatisé le plus avancé et modulable pour réussir ses procédures d'injections thérapeutiques et esthétiques en toute sécurité.

Champs d'application multiples et variés.

Visage | Corps | Cheveux

Pièce à main modulable.

Le dispositif HYCOOX dispose d'un porte seringue avec un système de piston qui permet d'accueillir différents types de seringues à têtes spécifiques.

Caractéristiques techniques.


- 3 modes d'injection : Auto, Tir Manuel, Semi Auto.
- 6 types de seringues de 1CC à 10CC (verre et autres).
- 8 types de procédures d'injection prédéfinis + 1 programme libre et personnalisable.
- 6 niveaux de vitesse qui s'adaptent aux 6 niveaux de viscosité produit.
- 4 niveaux de pression d'aspiration en fonction du type de peau.
- Intervalle entre chaque injection de produit paramétrable.




► Seringue modulable à tête interchangeable.



► Pièce à main à seringues interchangeables.

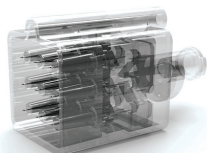

Tête à 9 aiguilles - 32G - 0,8 mm
Utilisation conseillée : Visage.
Tête à 9 aiguilles - 32G - 1,2 mm
Utilisation conseillée : Visage.

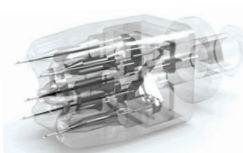

Tête à 5 aiguilles - 32G - 2 mm
Utilisation conseillée : Cheveux.
Tête à 5 aiguilles - 32G - 3 mm
Utilisation conseillée : Double menton.
Tête à 5 aiguilles - 32G - 4,5 mm
Utilisation conseillée : Corps.