

FRS

Face Re-birth System



6 technologies efficaces et sûres pour un traitement global du visage

Hydrodermabrasion - Pulvérisation et Nebulisation
Cold Emitting - Bio microcourant - Ultrasons - Scrubber

Capactuel
MEDICAL



Esthétique préventive et réparatrice

La technologie innovante FRS.

Indolore, non invasive, la fonction principale Hydrodermabrasion nourrissante du dispositif FRS est différente de la microdermabrasion classique principalement parce qu'elle n'utilise pas de cristaux. Gommage exfoliant revigorant qui permet d'éclaircir la peau, la technologie utilise surtout un générateur H2O2 qui facilite la pénétration des molécules d'eau et des solutions actives additionnelles au choix stockées dans les bouteilles du dispositif pour à la fois améliorer la texture cutanée, hydrater la peau, stimuler la circulation sanguine, réduire les effets du vieillissement.

|| Fonction Hydrodermabrasion nourrissante

Révolutionnaire, la technologie convient à tous types de peaux et phototypes, même les plus sensibles. Acné, petites rides et lignes d'expression, hyperpigmentation, peau grasse et congestionnée, pores dilatés et points noirs, de nombreuses problématiques cutanées sont traitées pour redonner éclat, élasticité, fermeté, vitalité, uniformité à la zone ciblée. Lissage cutané en douceur, ouverture temporaire des pores pour nettoyer, exfolier et extraire les impuretés, apport de sérums et nutriments stockés dans l'appareil avec pour effet une illumination du teint, une hydratation et protection de peau sur le long terme, avec plusieurs têtes interchangeable cette fonction innovante permet à la fois de détoxifier, rajeunir, restaurer la peau avec une seule pièce à mains.

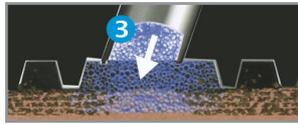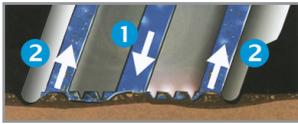

Hydrodermabrasion. Exfoliation des impuretés et cellules mortes (1) et aspiration par vacuum (2). Traitement et nettoyage cutané grâce aux solutions actives (3).



→ Pièce à main Hydrodermabrasion



Interface lisible sur écran tactile pour un réglage précis des pièces à mains



→ 3 bouteilles amovibles destinées aux principes actifs, sérums et nutriments.



Fiches spécifiques à chaque pièce à main

FRS ||

Face Re-birth System



- 1 Réglage du débit des liquides
- 2 Choix du mode A/B/C/D(H2O2)
- 3 Bouton d'ajustement du vacuum
- 4 Fiches de connexion des pièces à mains
- 5 Bouteilles de stockage A/B/C
- 6 Boutons d'extraction des bouteilles
- 7 Bouteille de collecte des déchets
- 8 Bouteille de stockage H2O2
- 9 Commutateur à prise d'alimentation



3 boutons de réglage manuel rapide d'accès pendant l'application



Bouteille H2O2 pour Hydrodermabrasion et récipient de collecte des déchets

FRS, c'est également une gamme de technologies complémentaires pour un traitement du visage sous toutes ses formes.

Pulvérisation et Nebulisation, Bio microcourant, Cold Emitting, Ultrasons, Scrubber, un concentré de technologies ayant fait leurs preuves pour des problématiques cutanées spécifiques.

FRS Face Re-birth System

Fonction Bio microcourant (RF bipolaire)

Le microcourant est un outil sûr et efficace pour qui souhaite conserver une peau jeune et saine, obtenir un lifting non invasif, réduire et éliminer rides, ridules, hypergimentation et acné, améliorer la circulation cutanée, augmenter la pénétration des principes actifs.

Fonction Ultrasons

Bien orientées, disposant d'une grande force d'expansion et pénétration, les ondes ultrasoniques générées par une oscillation à haute fréquence sont bien plus puissantes que les ondes sonores ordinaires et parfaitement transmises au milieu environnant. En raison de la forte oscillation, il est possible de ramollir, masser et activer les cellules de la peau, favoriser la circulation sanguine dans les micro-vaisseaux, accélérer le métabolisme, faciliter l'absorption des nutriments. Les ultrasons peuvent consommer de la graisse et améliorer l'absorption et la saturation en eau des cellules, afin que la peau puisse retrouver brillance et élasticité. Le micro massage obtenu élimine les cellules vieillissantes et évacue les toxines pour réduire les rides. Grâce à ses deux pièces à mains spécifiques (visage et yeux) l'application est facilitée et le résultat amélioré pour chaque zone traitée.

Fonction Cold Emitting

La technologie Cold Emitting consiste à utiliser la réactivité de la peau lorsqu'elle est confrontée à de basses températures. La pièce à main appliquée permet de refroidir la surface balayée avec une réaction rapide qui permet de rétrécir les pores, resserrer la peau, éliminer les rides, les rougeurs, la sensibilité, favoriser l'hyperplasie du collagène, atténuer cernes et poches sous les yeux.

Fonction Scrubber

La technologie à ultrasons du Scrubber permet de transformer les nombreuses ondes de choc électrique émises en vibrations mécaniques traitantes. Avec ces puissantes vibrations et l'utilisation de principes actifs on élimine facilement les cellules mortes, résidus de cosmétiques, maquillage, désincruste les impuretés dus au sébum à l'intérieur des pores, réduit les rides. La peau redevient saine, éclatante, flexible.

Fonction Pulvérisation et Nebulisation

L'association de pulvérisation ou nebulisation d'oxygène et de principes actifs permet de raffermir la peau et lui apporter rapidement nutriments et humidité. En fonction des solutions appliquées le traitement peut traiter bon nombre de problèmes de peau (taches, acné, cicatrices, teinte, texture...). Un meilleur résultat est obtenu avec des produits spécialement conçus (huiles pour SPA ou solutions d'esthétique médicale).

**Peau jeune, saine, lumineuse, hydratée, oxygénée, uniformisée...
toutes nos technologies peuvent être sélectionnées
et appliquées seules ou simultanément au fil des protocoles
avec des effets remarquables et rapidement visibles.**

+33 (0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com



→ Pièce à main Bio microcourant



→ Pièce à main Ultrasons



→ Pièce à main Cold Emitting



→ Pièce à main Scrubber



→ Pièce à main Pulvérisation et Nebulisation

Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice

FRS

Face Re-birth System

Contre-indications :

Personnes atteintes de fièvre, maladies infectieuses ou aiguës, maladie hémorragique, traumatisme, rupture vasculaire, inflammation de la peau, maladie de la peau, portant un stimulateur cardiaque configuré, souffrant maladie cardiaque, d'hypertension artérielle sévère, maladie tumorale, asthme, thrombose veineuse profonde, varices, thyroïde, cancer. Ne pas utiliser sur l'abdomen pendant les règles, sur les femmes enceintes, personnes munies de pièces en plastique ou métal à l'intérieur du corps et en cas de système immunitaire déficient.

Principales caractéristiques techniques :

Pièces à main	1 poignée Hydrodermabrasion (8 types de têtes) 1 poignée Bio Microcourant (RF) 1 poignée Pulvérisation et Nébulation 1 poignée Ultrasons 1 poignée Cold Emitting 1 poignée Scrubber
Puissance	350 W
Fréquence Ultrason	1 Mhz
Fréquence RF	3 Mhz
Têtes hydrodermabrasion	8 têtes interchangeable
Vacuum	0-90 Kpa
Capacité du débit	30 L max
Affichage	Ecran tactile 7.0 pouce
Sortie Max	250VA
Voltage	100V-240V, 50Hz/60Hz
Dimensions	42,5 x 30 x 45,5 cm
Poids Net	8 KG

Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice

+33 (0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com