



PURAXEL FX-5000

Laser Beauty Device

Laser

Ultrasonic

Galvanic

Cooling

LED



Laser esthétique fractionné Er:Yag, 2940nm à sécurité cutanée éprouvée.

Rapide, sûr et hygiénique. Pas d'aiguille ! Pas de douleur ! Pas d'effets secondaires !

Génère 100 micropores uniformes par tir au niveau du tissu épidermique à une profondeur inférieure à 200 µm.

Améliore hydratation, luminosité, densité cutanée, traite mélasma, rides et pertes de cheveux.

Favorise considérablement la pénétration des substances actives contenues dans les cosmétiques.

Poids : Corps principal 520g / Berceau 410g • **Dimensions :** Corps 82(L)x201(P)x225.3(H)mm / Berceau 250x169x135mm

Batterie : Lithium-polymère 11,1V 1 300mAh • **Adaptateur de charge :** 14VDC / 1,71A

Fractional Er:Yag 2940nm aesthetic laser with proven skin safety.

Fast, safe and hygienic care. No needles ! No pain ! No side effects !


Generates 100 uniform micropores per shot in the epidermal tissue to a depth of less than à 200 µm.

Improves moisture, brightness, skin density, treats melasma, wrinkles and hair loss.

Significantly enhances the penetration of active ingredients contained in cosmetics.

Weight : Main Body 520g / Cradle 410g • **Dimensions :** Body 82(W)x201(D)x225.3(H)mm / Cradle 250x169x135mm

Battery : 11.1V 1,300mAh Lithium-Polymer • **Charging Adapter :** 14VDC / 1.71A

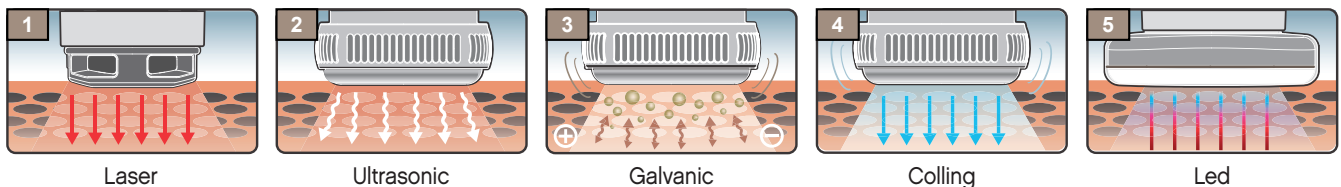

Laser


Ultrasonic

Galvanic

Cooling

Led

PURAXEL FX-5000

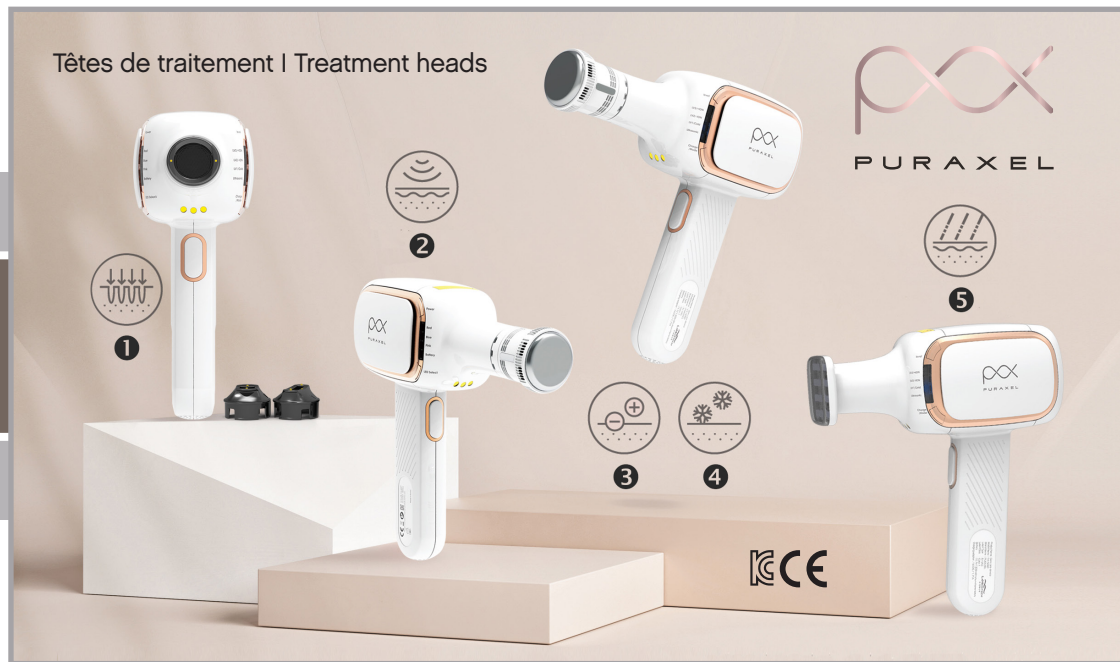

1 Mode laser . Création de micro trous cutanés. Laser Er:YAG - Classe 1 - Niveau : 1-3.
Crée des micro-pores dans la peau et diffuse de façon spectaculaire des nutriments et divers produits cosmétiques.

2 Mode ultrasonique . Absorption des nutriments fonctionnelle. Traitement : 5 min.
Améliore le taux d'absorption des solutions grâce aux ondes ultrasoniques.

3 Mode galvanique (Option) . Nettoyage en profondeur et absorption des nutriments. Traitement : 4 min.
La nature positive du courant évacue les déchets, et celle négative (-) améliore le taux de distribution des nutriments.

4 Mode Refroidissement (Option) . Apaiser la peau et réduire les pores. Traitement : 4 min.
Le Mode refroidissement pour minimiser et ajuste les pores après l'utilisation du laser, des ultrasons ou du mode LED.

5 Mode LED (Option) . Hydratation, élasticité et effet apaisant. Traitement : 3 min.
Les modes rouge, bleu et rose permettent de calmer les peaux à problèmes (acné), d'hydrater et d'améliorer l'élasticité.

1 Laser Mode . Creation of skin micro holes. Laser Er:YAG - Classe 1 - Level : 1-3.
Create multi micro holes in the skin and dramatically deliver nutrients and various cosmetics.

2 Ultrasonic Mode . Functional nutrient absorption. Treatment : 5 min.
Improve absorption rate of solutions by ultrasonic waves.

3 Galvanic Mode (Optional) . Deep cleansing and nutrient absorption. Treatment : 4 min.
Positive(+) nature of the rectified current, discharges waste, while the negative(-) enhances the delivery rate of nutrients.

4 Cooling Mode (Optional) . Soothing skin and reducing pores. Treatment : 4 min.
The Cooling mode to minimize and settle pores after using laser, ultrasonic, or LED mode.

5 LED Mode (Optional) . Moisturizing, elasticity and soothing effect. Treatment : 3 min.
Through the Red, Blue and Pink modes, calm troubled skin (acne), moisturize, and improve elasticity.



Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*