

ANTI-AGE

MAGAZINE

Successful Aging

25 experts vous conseillent
Advice from 25 experts

**TRANSE
COGNITIVE
ET ANTI-ÂGE**

**COGNITIVE
TRANSE AND
ANTI-AGING**

**DU RAFFERMISSEMENT
AU RAJEUNISSEMENT
CUTANÉ
FROM SKIN FIRING
TO SKIN REJUVENATION**

**L'inéluctable
plongée
de la libido ?**

**Is a loss
of libido
inevitable?**

**Se battre contre
le photovieillissement**

**The fight against
photoaging**

Spécial

**Combattre taches
et rougeurs** *Special: Combat
spots and redness*

**NOS LIEUX
INCONTOURNABLES
OUR MUST-VISIT
PLACES**

EuroMediCom

Juillet, Août, Septembre 2021
July, August, september 2021

#43

M 05492 - 43 - F: 4,90 € - RD





CONSEILS D'EXPERT // EXPERT ADVICE



Dr Frederique Rogissart

Diplômée en Chirurgie Plastique
Reconstructrice et Esthétique en 1995.
Médecine Esthétique.
Centre lasers, LED, cryothérapie,
cheveux, micro nutrition, cosmétologie.
Vichy

Graduated in Plastic Reconstructive
and Aesthetic Surgery in 1995.
Aesthetic medicine.
Lasers, LED, cryotherapy,
hair, micro nutrition, cosmetology.
Vichy

chirurgie-esthetique-frederiquerogissart.com

[frederiquerogissart](https://www.facebook.com/frederiquerogissart)

[chirurgieesthetiquevichy](https://www.instagram.com/chirurgieesthetiquevichy)

NOUVEAU TRAITEMENT DU RELACHEMENT CUTANE DU VISAGE ET DU COU AVEC L'INNOVATION DU THERMA D.A.S. : L'INTRALIFTING PAR RADIOFRÉQUENCE ENDODERMIQUE NEW TREATMENT FOR SAGGING SKIN ON THE FACE AND NECK WITH THE THERMA D.A.S. INNOVATION: INTRALIFTING WITH ENDODERMAL RADIOFREQUENCY

Une combinaison Plasma et Radiofréquence endodermique

A combination of plasma and endodermic radiofrequency

La correction de la ptose de l'ovale du visage (les bajoues), du relâchement du cou sont des demandes de plus en plus fréquentes des patient(e)s, sans avoir recours à la chirurgie, ni aux fillers et aux fils tenseurs. C'est pourquoi, mon cabinet s'est équipé du 1^{er} Therma D.A.S. (Technolux), l'unique plateforme combinant une radiofréquence thermorégulée endodermique couplée à la technologie plasma.

Correcting ptosis in the oval of the face (jowls) and sagging in the neck are every more frequent demands from patients, without resorting to surgery or fillers or tensor threads.

This is why my practice is equipped with the first Therma D.A.S. (Technolux), the only platform combining thermoregulated endodermal radiofrequency coupled with plasma technology.

**CETTE PROCÉDURE VISE
À OBTENIR UNE STIMULATION
PROFONDE DU COLLAGÈNE
ET UN EFFET TIGHTENING.**

*THIS PROCEDURE AIMS
TO DEEPLY STIMULATE
THE COLLAGEN AND OFFER
A TIGHTENING EFFECT.*

» Thermo D.A.S. est un dispositif médical comprenant deux composants principaux (un 3ème en automne 2021) :

- EndoD.A.S. : utilisant le principe de radiofréquence thermo-régulée. Il agit dans les tissus sous cutanés par émission d'ondes électromagnétiques qui provoquent une élévation de la température contrôlée au niveau dermique, hypodermique, une dénaturation des fibres de collagène (de 5 à 30%) avec pour conséquence une contraction immédiate des fibres de collagène qui s'amplifie pendant 6 mois. Elle stimule les fibroblastes et génère une nouvelle synthèse de collagène et d'élastine.
- D.A.S. Pro Plasma : (Dermo Ablation Surgery) ancien D.A.S. Medical : Il s'agit d'une radiofréquence à ondes longues à effet plasma. L'énergie fournie permet de créer une différence de potentiel entre la pointe de l'instrument et la peau, induisant une ionisation des gaz contenus dans l'air. L'échauffement de ces gaz entraîne la production d'un microplasma stable provoquant une thermolyse sélective et contrôlée de l'épiderme, induisant un effet de rétraction cutanée immédiate et l'élimination des imperfections cutanées.

Les deux composants peuvent être utilisés en association, ou pas, en fonction des indications. J'utilisais déjà dans ma pratique l'ancien D.A.S. Medical pour différentes indications : blépharoplastie médicale, chirurgie cutanée bénigne, vergetures. Les bons résultats et la simplicité de la technique m'ont conduit à m'intéresser à cette nouvelle technique EndoD.A.S.

Procédure EndoD.A.S. :

1. Marquage des zones à traiter après évaluation clinique du relâchement cutané en général tracé en éventail comprenant 2 à 5 lignes.
2. Anesthésie locale au point d'entrée, pré trou avec une aiguille de 18G.



Thermo D.A.S. is a medical device made up of two main components (a third will be added in autumn 2021):

- EndoD.A.S.: using the principles of thermoregulated radiofrequency. It acts in the subcutaneous tissues by emitting electromagnetic waves that raise the temperature in the dermis and hypodermis, denaturing the collagen fibres (by 5 to 30%), the consequence of which is the immediate contraction of the collagen fibres, which increases over 6 months. It stimulates the fibroblasts and generates new collagen and elastin synthesis.
- D.A.S. Pro Plasma: (Dermo Ablation Surgery), formerly D.A.S. Medical: this is a long wave radiofrequency with a plasma effect. The energy supplied allows us to create a potential difference between the tip of the instrument and the skin, leading to the ionisation of the gases contained in the air. When these gases are heated up, it produces a stable microplasma which leads to selective and controlled thermolysis in the epidermis, which causes the skin to immediately retract and eliminates any skin flaws.



EndoD.A.S.
à radiofréquence
thermo régulée
EndoD.A.S.
thermo-regulated
endodermal radiofre-
quency cannula

3. Introduction de la canule à usage unique de diamètre de 0.8 mm et de longueur de 7,5 cm avec une pointe active distale de 1cm, insérée à environ 5mm de profondeur dans le tissu sous cutané.
4. Pour démarrer le traitement : on règle la température thérapeutique optimale (de 40° à 57°). Écran tactile, paramètres pré intégrés et mode expert.
5. Mouvement de la canule rétrograde de 1 cm/1 cm sur 7,5 cm afin de chauffer uniformément la ligne de traitement. Temps de traitement : 3 min par ligne.
6. Sensation d'échauffement ressentie par le patient.
7. Un effet minilifting immédiat apprécié des patients.
8. 1 à 3 séances à 3 mois d'intervalle selon l'évaluation clinique.

Indications :

Cette procédure vise à obtenir une stimulation profonde du collagène et un effet tightening.

- Laxité modérée du visage et du cou : tiers moyen du visage, ovale du visage, cou, paupières.
- Laxité modérée et localisée de différentes zones du corps : coudes, genoux, bras, abdomen.

Contre-indications :


Ne pas être enceinte. Ne pas porter de dispositif cardiaque implanté (stimulateur, défibrillateur) ni de prothèses, plaques métalliques à proximité de la zone de traitement. Ne pas avoir de maladies cardiaques ni respiratoires chroniques. Allergie aux anesthésiques locaux.

L'intralifting EndoD.A.S. est une technologie efficace qui permet de redessiner le contour de l'ovale du visage et cou, de certaines zones localisées du corps (bras, coudes, genoux, abdomen).

Elle est à intégrer dans notre arsenal thérapeutique (chirurgie, fillers, fils tenseurs, lasers Erbium, CO2...)

Ses avantages sont nombreux : réalisable au cabinet, effet lifting immédiat et durable, suites simples sans éviction sociale, courbe d'apprentissage rapide et protocoles évolutifs qui répondent à la demande croissante de nos patients.

Traitement avec la canule EndoD.A.S.
Treatment with EndoD.A.S. cannula

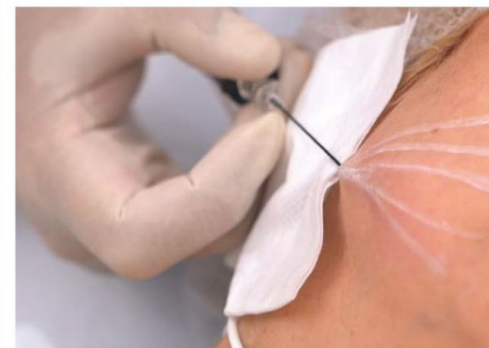

The two components can be used in combination with one another or individually, depending on the indications. I already used the D.A.S. Medical in my practice for various indications: medical blepharoplasty, benign skin surgery, stretch marks. The good results and the simplicity of the technique are what led me to take an interest in this new EndoD.A.S. technique.

EndoD.A.S. procedure:

1. The treatment areas are marked out after a clinical evaluation of the skin sagging. They are generally traced in a fan pattern comprised of 2 to 5 lines.
2. Local anaesthetic at the entry point, pre-hole with an 18G needle.
3. The single-use cannula (0.8mm diameter, 7.5cm long with a 1cm active distal tip) is inserted to a depth of around 5mm into the subcutaneous tissue.
4. To begin, we set the optimal temperature for treatment (from 40° to 57°). The device has a touch-screen, pre-programmed settings and expert mode.
5. The cannula is moved in a retrograde pattern 1cm by 1cm across 7.5cm in order to evenly heat the treatment line. Treatment time: 3 min per line.
6. The patient feels a warm sensation.
7. It gives a mini-lifting effect, which patients appreciate.
8. 1 to 3 sessions are required, spaced 3 months apart, depending on the clinical evaluation.

Indications:

This procedure aims to deeply stimulate the collagen and offer a tightening effect.

- Moderate sagging in the face and neck: middle third of the face, oval, neck, eyelids.
- Moderate and localised sagging in different areas of the body: elbows, knees, arms, abdomen.

Contraindications:

Pregnancy; implanted cardiac device (pacemaker, defibrillator) or prosthetics; metal plates near the treatment area; heart problems or chronic respiratory issues; allergy to local anaesthetics.

EndoD.A.S. intralifting is an efficient technology that allows us to reshape the contour and oval of the face and neck, as well as certain localised areas of the body (arms, elbows, knees, abdomen).

It deserves a place in our therapeutic arsenal (surgery, fillers, tensor threads, Erbium lasers, CO2, etc.).

It offers a great many advantages: it can be carried out in a doctor's practice, it offers an immediate and long-lasting lifting effect, mild after-effects and no downtime, it has a rapid learning curve, and its protocols can evolve to respond to our patients' increasing demands.

Nouveaux traitements anti-âge
New anti-aging treatments

Capactuel
MEDICAL
Preventive and Restorative Aesthetic

Therma D.A.S.
DERMO ABLATION SURGERY



CAPACTUEL
THERMA D.A.S.

Une combinaison Plasma et Radiofréquence endodermique
A combination of plasma and endodermal radiofrequency

Therma D.A.S. est un dispositif médical qui combine plasma et radiofréquence endodermique en deux programmes : EndoD.A.S. et D.A.S. Pro Plasma. La température intradermique distribuée par la canule thermostatée assure une sécurité optimale pour le patient. EndoD.A.S. redessine les contours du visage et du cou par intralifting de manière minimalement invasive, par stimulation en profondeur du collagène et des fibroblastes afin de remodeler les contours du visage et du cou. D.A.S. Pro Plasma agit dans les couches superficielles de la peau pour éliminer les rides et ridules, lésions pigmentées, cicatrices, vergetures, pour améliorer la texture et la qualité de la peau ou pour effectuer une blépharoplastie non-chirurgicale.

Therma D.A.S. is a medical device that combines plasma and endodermal radiofrequency in two programmes: EndoD.A.S. and D.A.S. Pro Plasma. The intradermal temperature diffused by the thermostated cannula guarantees optimum safety for the patient. EndoD.A.S. firms up the contours of the face and neck by performing a minimally-invasive intralift, deeply stimulating the collagen and fibroblasts in order to reshape the contours of the face and neck. D.A.S. Pro Plasma targets the skin's superficial layers to erase fine lines and wrinkles, pigmented lesions, scars and stretch marks, to improve the skin texture and quality or for a non-surgical blepharoplasty.

info @ capactuel.com



Nouvelle fonction | New feature

EndoD.A.S.

Canule d'intralifting à RF thermo-régulée
Thermo-regulated RF intralifting cannula

D.A.S. Pro Plasma

Dermo ablation et plasma exérèse
Plasma exeresis and dermo ablation

2 appareils en 1 | 2 devices in 1

Therma D.A.S.
DERMO ABLATION SURGERY

SFME-AFME

PARIS -> 3 - 4 Sept. 2021

Palais des Congrès Porte Maillot - Stand 12

AMWC

MONACO -> 16 - 18 Sept. 2021

Forum Grimaldi - Hall Diaghilev - Stand C8



#endodas #intralifting
#thermadas #technolux #capactuel

Avec la canule à radiofréquence endodermique thermostatée qui glisse en douceur dans le tissu sous-cutané, le **Mode EndoD.A.S.** permet d'effectuer la technique d'intralifting sans endommager les vaisseaux et nerfs. Le **Mode D.A.S. Pro Plasma** agit sur les couches cutanées superficielles pour réduire et éliminer les imperfections de peau. Sûr, peu invasif, interruptions minimales : obtenez d'excellents résultats esthétiques et rajeunissants avec **ThermaD.A.S.**

With the thermo-regulated endodermal radiofrequency cannula that glides smoothly through the subcutaneous tissue, **EndoD.A.S. Mode** allows to perform the Intralifting technique without causing damage to vessels and nerves. **D.A.S. Pro Plasma Mode** works on the superficial skin layers to reduce and remove any unsightly skin blemishes. Safety, low invasiveness, minimal downtime : get excellent aesthetic and rejuvenating results with **ThermaD.A.S.**

Nouveau Intralifting | New Intralifting



Canule de 7,5 cm à embout actif de 1 cm pour une RF endodermique thermo régulée.
7.5 cm cannula with 1 cm active tip for a thermo-regulated endodermal RF.

Technolux

Via Punta Licosa 19 - 20156 Milano - Italy
www.technolux.it

technoluxsrl technoluxsrl

Therma D.A.S. is a medical device by Technolux srl.
Cap actuel is the distributor in France.

Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice
20-22, rue Richer - 75009 Paris - France
www.capactuel.com

CAPACTUEL capactuel.france